

CODAN Contrelle®



Activgard





CODAN

Contrelle®



Contrelle® Activgard

er en helt ny måde at løse problemet med stressinkontinens på. Hovedårsagen til dette problem er svag bækkenbundsmuskulatur, ofte forårsaget af fødsler eller forandringer i forbindelse med overgangsalderen. Når bækkenbundsmuskulaturen svækkes, synker blæren lidt og vinklen på blærehalsen ændres. Dette bevirker, at musklerne i bækkenbunden ikke længere er under fuld kontrol i forbindelse med belastninger.

Ved Contrelle® Activgard placering i vagina betyder udformningen, at blæren understøttes lidt og den korrekte vinkel på blærehalsen genetableres. Patienten genvinder kontrollen over blæren og kan holde tæt også ved fysisk udfoldelse. Desuden, og lige så vigtigt, kan patienten gå på toilettet som sædvanligt uden at fjerne Contrelle® Activgard.


Unikt design og funktion

Contrelle® Activgard

arbejder snarere aktivt end passivt. Materialet er blødt formstøbt polyuretanskum. Contrelle® Activgard bøjes sammen inden indføring, elasticiteten vil få den til at rette sig ud i vagina. Dette giver en blød og fjedrende effekt, som understøtter blæren samtidig med at den perfekt og smidigt følger kroppens bevægelser. Den ydre overflade af Contrelle® Activgard er specielt designet til at presse mod blærehals og rectum. Derfor er det vigtigt, at den er placeret korrekt, som vist på tegningen.

Let at bruge

Contrelle® Activgard er lige så let at indføre og bruge som en tampon og den hverken føles eller ses. Gennemfugtet med vand inden indføring absorberer Contrelle® Activgard ikke fugtighed fra slimhinderne i vagina. Contrelle® Activgard er et ukompliceret hjælpemiddel, der angriber problemet i stedet for symptomerne.

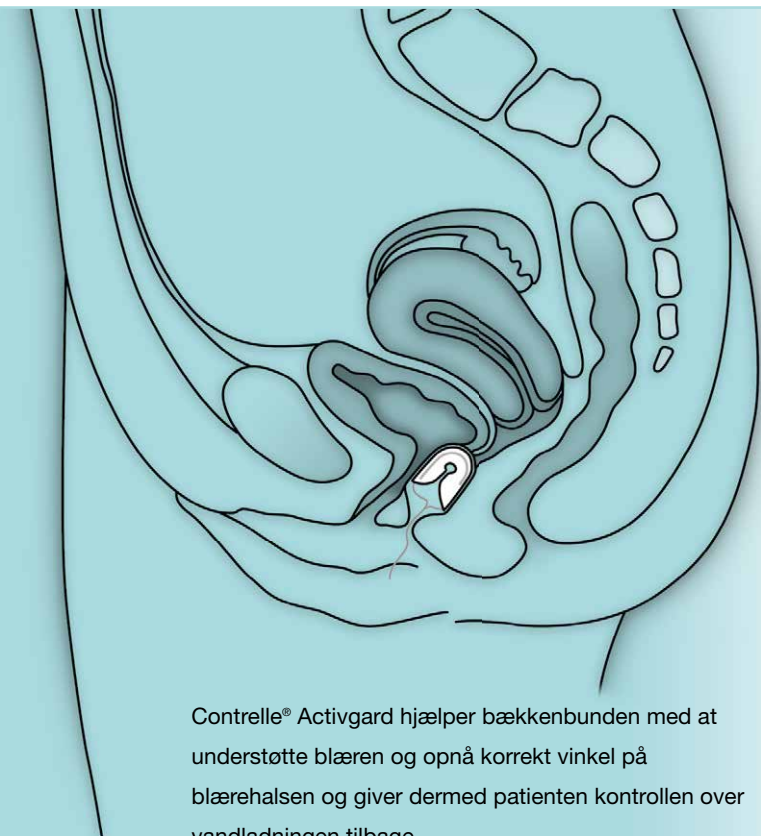

Contrelle® Activgard hjælper bækkenbunden med at understøtte blæren og opnå korrekt vinkel på blærehalsen og giver dermed patienten kontrollen over vandladningen tilbage.



Blød og fjedrende elasticitet.
Følger kroppens bevægelser.

Normale toilet besøg

Det er ikke nødvendigt at fjerne Contrelle® Activgard ved toiletbesøg. Contrelle® Activgard trykker ikke på urinrøret, men understøtter blærehalsen således, at den naturlige kontrol genoprettes.

Anvendelse

Contrelle® Activgard kan anvendes i op til 16 timer pr. døgn. Den skal fjernes før samleje og kun anvendes under graviditet efter samråd med læge.

Ved menstruation bør Contrelle® Activgard skiftes hver 4-6 time. Den kan anvendes samtidig med, at der anvendes bind. Tampon og Contrelle® Activgard kan ikke anvendes samtidigt.

Mange fordele

Contrelle® Activgard er et ukompliceret og effektivt hjælpemiddel til kvinder med stress inkontinens.

Et normalt liv igen

Ved at give kvinder kontrollen over blære og vandladning tilbage, tillader Contrelle® Activgard kvinder at leve normalt igen. Kvinder skal ikke længere leve med den usikkerhed, som pludselig ufrivillig vandladning kan give og de behøver ikke være nervøse for at skulle skifte bind eller bekymre sig om lugtgener. Kvinder kan leve præcis samme liv, som inden de blev inkontinente.

Usynlig og diskret

Contrelle® Activgard skal placeres i vagina og er lige så usynlig og diskret som en menstruationstampon. Den kan anvendes i op til 16 timer pr. døgn. Contrelle® Activgard er et engangsprodukt og skal ikke genbruges.



Contrelle® Activgard
med applikator.

Contrelle® Activgard

Tre Størrelser

Contrelle® Activgard findes i tre størrelser og brugeren må eksperimentere sig frem til, hvilken størrelse, der er bedst. I begyndelsen vil nogle kvinder opleve en let irritation indtil de bliver vant til at anvende produktet. Der kan sammenlignes med tilvænning til kontaktlinser.

Bækkenbundstræning

Contrelle® Activgard er ingen erstatning for bækkenbundstræning, men vil forstærke træningen og er et supplement i de tilfælde, hvor bækkenbundstræningen ikke giver den optimale effekt.

TSS

Toxic Shock Syndrome er meget sjældent. Blandt de få kendte tilfælde var halvdelen kvinder, der anvendte tampon. I de fleste tilfælde drejede det sig om yngre kvinder, som anvendte tamponer med stor absorberingsevne.

Contrelle® Activgard har ingen absorberingsevne ved korrekt anvendelse i form af gennemvædning med vand før brug.

Ingen ændringer i Ph eller bakterie forhold

Ved undersøgelser i Danmark er ingen ændringer i Ph værdier eller bakterieflora påvist. Øget frekvens af vaginitis, blærebetændelse eller slimhindeirritation kunne heller ikke påvises.

Lidt glidecreme kan gøre indføringen af Contrelle® Activgard i skeden lettere, og ældre patienter kan have fordel af lokal hormonbehandling.



Contrelle® Activgard skal gennemvædes med vand inden indføring.

Kort brugsvejledning

Contrelle® Activgard er lige så let at anvende som en almindelig tampon

- Contrelle® Activgard gennemvædes med rindende koldt vand.
- Contrelle® Activgard lægges omkring applikatoren, ved at placere snoren omkring den nederste ende af applikatoren og lade toppen af applikatoren hvile i Activgard fordybningen.
- Applikator og Contrelle® Activgard føres ind i vagina indtil rillerne på applikatoren.
- Fjern snoren fra applikatoren og træk applikatoren ud. Rengør applikatoren, så den igen er klar til brug.
- Contrelle® Activgard fjernes ved let træk i snoren.

CODAN

Contrelle® Activgard er veldokumenteret

I 1994 gennemførtes to kliniske undersøgelser med Contrelle® Activgard. Den ene inkluderede 26 stress inkontinens patienter på Glostrup Sygehus i Danmark, den anden 129 stress inkontinente kvinder fra 10 forskellige svenske hospitaler.

Studierne inkluderede både subjektive og objektive parametre. De objektive var 24 timers ble-vejningstest for at fastslå lækagemængden. I forbindelse med den danske undersøgelse gennemgik patienterne forinden en grundig undersøgelse, inkluderende vaginal dyrkning, Ph-måling, residuralurinmåling, urindyrkning, vandladningsskema samt en urodynamisk undersøgelse. De subjektive målinger blev foretaget ved hjælp af spørgeskemaer.

80 % oplevede en positiv effekt

I den danske undersøgelse syntes 21 ud af 22 patienter at Contrelle® Activgard var tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende. I den svenske undersøgelse var de modsvarende tal 66 ud af 90.

Subjektivt oplevede 87 % af de danske patienter at Contrelle® activgard reducerede frekvensen af lækage tilfælde og 72 % oplevede en reduktion i mængden af urin i det enkelte lækage tilfælde.

De tilsvarende tal fra den svenske undersøgelse var 77 % og 74 %.

35 % blev komplet kontinente

De objektive målinger viste, at i Sverige blev 35 % af testgruppen kontinente og 77 % kunne melde om forbedringer. I Danmark var tallene 36 % kontinente og 64 % oplevede forbedring.

Ingen mærkbare bivirkninger

Undersøgelserne viste også, at Contrelle® Activgard ikke viser tegn på forandringer i Ph værdi eller bakteriefloraen i skeden, ingen øget risiko for vaginitis, blærebetændelse eller slimhindeirritation.

Subjektivt oplevede nogle patienter en mild irritation, fortrinsvis i starten. Imidlertid oplyser de fleste af disse, at de ønsker at fortsætte med at anvende Contrelle® Activgard.



Contrelle® Activgard

Størrelse 1

REF 76.1001	30 stk. pr. pakke
-------------	-------------------

Størrelse 2

REF 76.1002	30 stk. pr. pakke
-------------	-------------------

Størrelse 3

REF 76.1003	30 stk. pr. pakke
-------------	-------------------

Hver pakke indeholder en applikator.



CODAN På verdensplan



CODAN er internationalt anerkendt som producent og leverandør af medicinske engangsartikler. CODAN Companies har mere end 1.500 ansatte over hele verden.

Navnet CODAN repræsenterer pålidelighed, kvalitet og præcision på grundlag af den erfaring og viden, som mere end 50 års udvikling og forskning har resulteret i. Vores produktionsfaciliteter og salgsorganisationer over hele verden yder førsteklasses service til alle vores kunder i sundhedssektoren.

CODAN Companies

CODAN Medizinische Geräte GmbH & Co KG · Deutschland
CODAN pvb Critical Care GmbH · Deutschland
CODAN pvb Medical GmbH · Deutschland
CODAN PORTUGAL, S.A. · Portugal
CODAN 11, S.A. · Portugal
CODAN US Corporation · California · USA
CODAN Inc. · California · USA
CODAN NORGE AS · Norge
CODAN TRIPLUS AB · Sverige
CODAN Limited · Great Britain
CODAN FRANCE Sarl · France
CODAN Medical AG · Schweiz
CODAN ARGUS AG · Schweiz
CODAN BV · Nederland
CODAN s.r.l. · Italia
CODAN Medical GmbH · Österreich
CODAN Steritex ApS · Danmark
CODAN Medical ApS · Danmark
CODAN DEHA ApS · Danmark



CODAN Medizinische Geräte GmbH & Co KG
Stig Husted-Andersen Straße 11 · D-23738 Lensahn
Tel. +49 (0) 43 63 · 51 11 · Fax. +49 (0) 43 63 · 51 12 14
www.codan.de

The decisive connection

CODAN Produktprogram

- Infusionssæt
- Transfusionssæt
- Forlængerslanger og connectorer
- I.V. tilbehør
- I.V. filtre og filtersystemer
- Produkter til neonatologi/pædiatrien
- Udstyr til optræk, forberedelse og administration af medicin
- CODAN CYTO®
- Chemoprotect®
- CODAN ENTERAL
- Sprøjter
- Tilbehør til Invasiv blodtryksmåling
- Infusions- og sprøjtepumper
- Inkontinensprodukter
- Andet CODAN Udstyr

Det etablerede kvalitetsstyringssystem overensstemmelse med bestemmelserne i EN ISO 13485 og EU-direktivet 93/42/EØF er certificeret af de kompetente ansvarlige myndigheder. Dermed er vi berettiget til at mærke vore produkter med:

CE 0123 TÜV Product Service
CODAN Medizinische Geräte GmbH & Co KG
D-23738 Lensahn

CE 0543 Presafe Denmark A/S
CODAN Steritex ApS · DK-3060 Espergærde

CE 0543 Presafe Denmark A/S
CODAN Medical ApS · DK-4970 Rødby

CE 0123 TÜV Product Service
CODAN pvb Critical Care GmbH
D-85661 Forstinning

Kontakt

CODAN DEHA ApS
Højvangen 6
DK-3060 Espergærde
Tel. +45 49 12 11 80
Fax. +45 49 12 11 90
codan@codandeha.dk